



VERORDNUNG

PATIENTEN-
ZUGANG

ZUBEREITUNG

VERABREICHUNG

ENTLASSUNGS-
MANAGEMENT

compact^{plus}
EINEN SCHRITT VORAUS

Infusomat® und Perfusor® compact^{plus}

Einen Schritt voraus




BRILLIANTES
FARBDISPLAY




GEFÜHRTES
EINLEGEN



INTUITIVE
BEDIENUNG

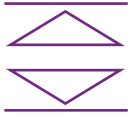

INDIVIDUELLE
MEDIKAMENTEN-
DATENBANK

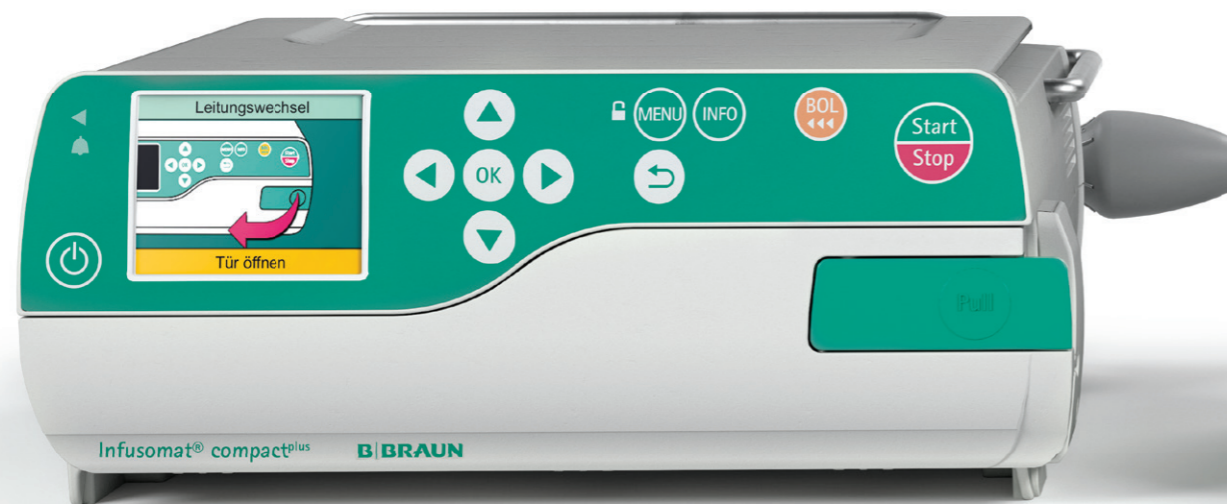

KURZE
EINARBEITUNGS-
ZEIT



SCHNELLER
INFUSIONSSTART



B. BRAUN
PRÄZISION



LANGLEBIGER
LI-IONEN AKKU



INTEGRIERTES
NETZTEIL



INTEGRIERTER
TRAGEGRIF



ROBUSTES
DESIGN



SPRITZWASSER-
SCHUTZ IP34


Perfusor® compact^{plus} Spritzenpumpe



Flexibilität
Bis zu 3 Pumpen stapelbar.
Für einen einfachen und
sicheren Transport.

Grafische Bedienoberfläche
Grafisch unterstützte Menü-
führung sorgt für eine kurze
Einarbeitungszeit und einfache
Bedienung

Halbautomatischer Antrieb
Für einen präzisen Start
der Infusion.

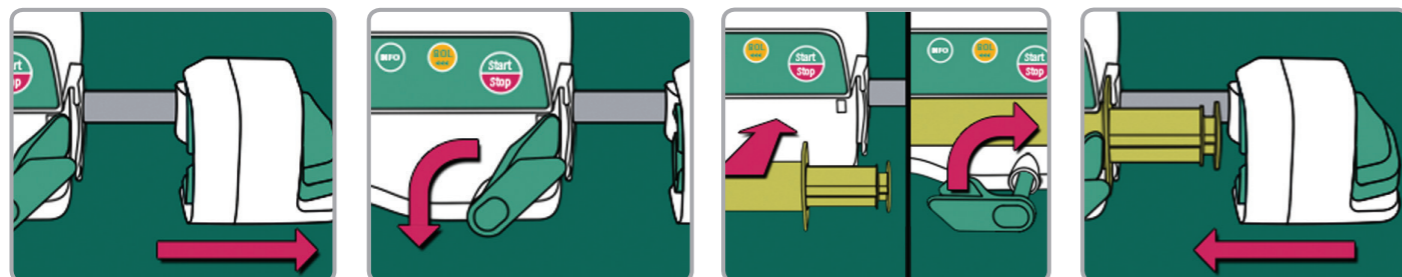

BRILLIANTES
FARBDISPLAY




GEFÜHRTES
EINLEGEN



INTUITIVE
BEDIENUNG

Infusomat[®] compact^{plus}

Volumetrische Infusionspumpe

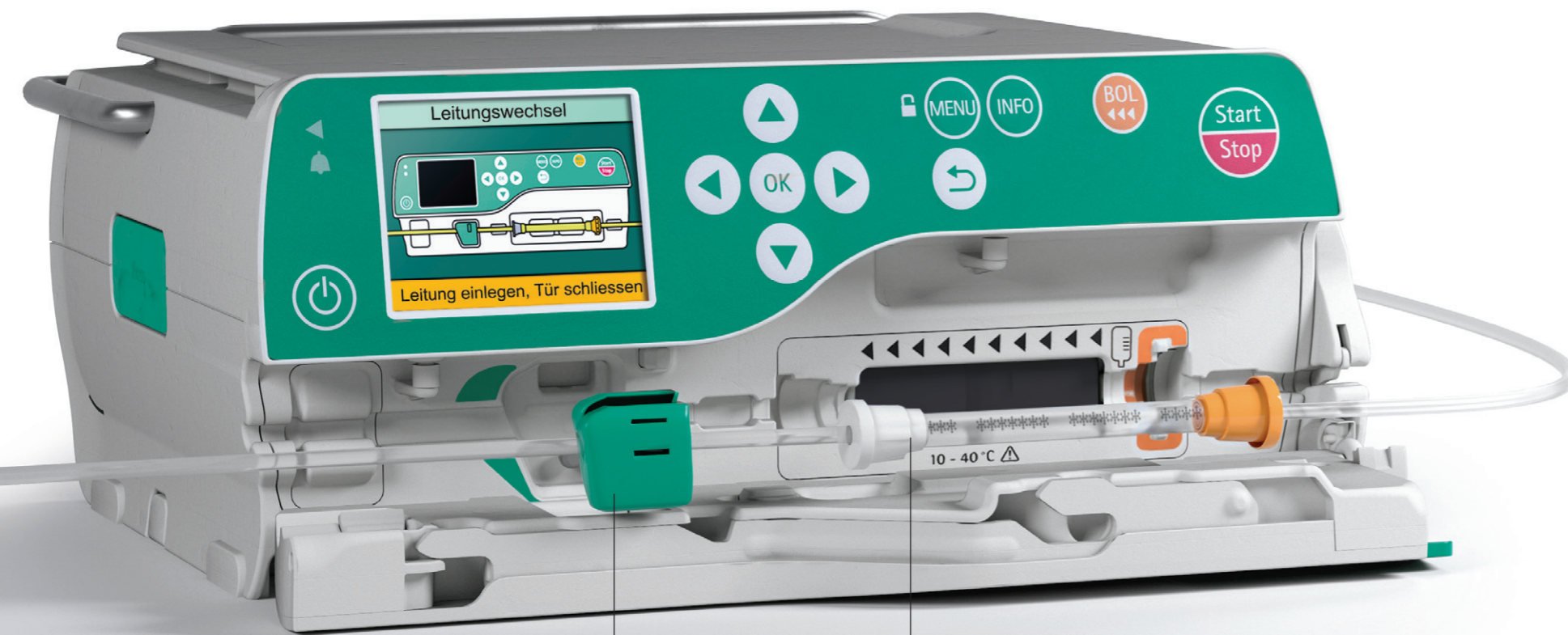

Sicherheitsklemme
Verhindert Free Flow für mehr Patienten- und Anwendersicherheit.

Infusomat^{plus} Leitung
Farbliche Kennzeichnung auf Pumpe und Leitung und optimal aufeinander abgestimmte Formgebung sorgen für ein einfaches und sicheres Einlegen.





AIR STOP

AirStop
Die einzigartige hydrophile Filtermembran im Tropfkammerboden wirkt wie eine Barriere. Sie verhindert auch nach dem Leerlaufen des Behälters durch einen konstanten Flüssigkeitsspiegel das Eindringen von Luft und Partikeln.




PRIME STOP

PrimeStop
Die Schutzkappe ist mit einer hydrophoben, für Flüssigkeiten undurchlässigen Membran ausgestattet. Beim Entlüften des Systems wird das Austreten der Lösung am Ende der Leitung verhindert. Das Infusionssystem ist bis zur Konnektion am Patienten ein geschlossenes System.

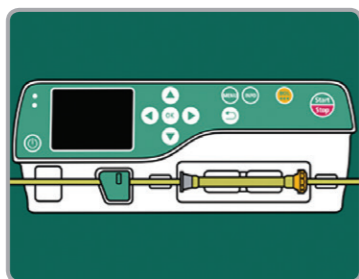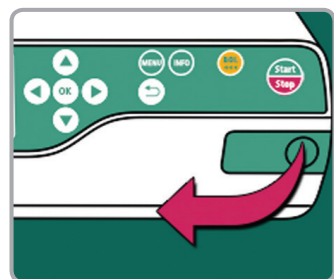

ERNÄHRUNGSTHERAPIE

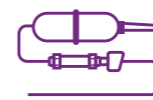

INFUSOMAT^{PLUS} SAFESET



BRILLIANTES FARBDISPLAY




GEFÜHRTES EINLEGEN



INTUITIVE BEDIENUNG

Station compact^{plus} Kompakt konnektiert

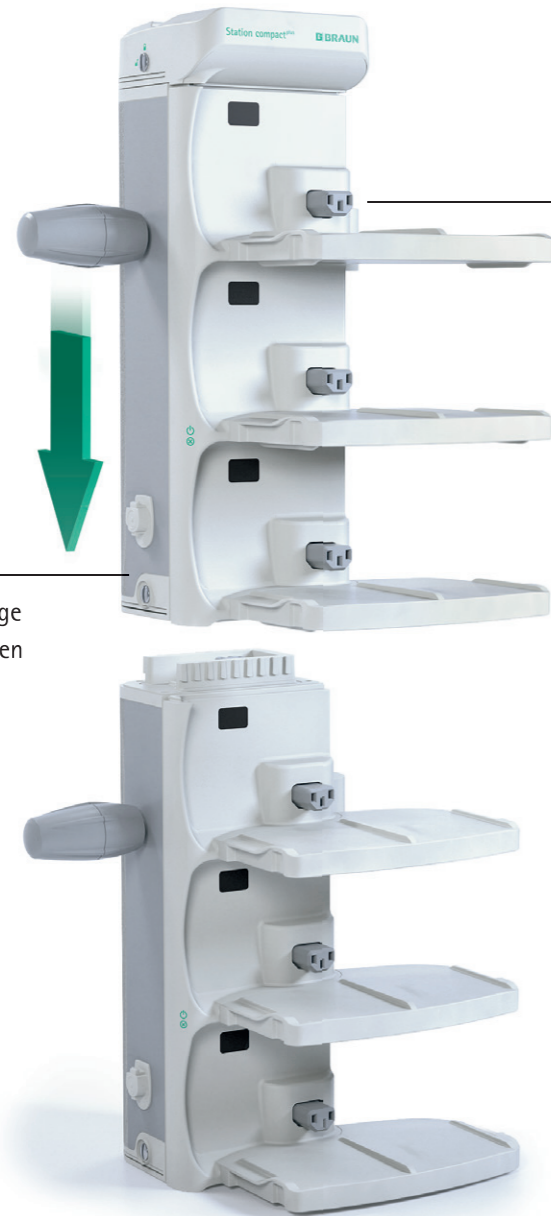

Werkzeugfreie Montage

Schnelle und einfache Montage der Stations, einfach einstecken und verriegeln.

Intelligenter Stromanschluss


Stromfluss wird erst bei angeschlossenen Pumpen hergestellt. Für mehr Anwendersicherheit, auch während der Desinfektion.

Tableau

Für ein sicheres und einfaches Einlegen.



18 Flexible Konfiguration
Bis zu 18 Pumpen/6 Stations können flexibel pro Bettplatz miteinander verbunden werden.

 Datenmodul compact^{plus}
Flexible, auch drahtlose, Integration in Krankenhausnetzwerke.



GEFÜHRTES
EINLEGEN



INTELLIGENTE
STROMZUFUHR





WERKZEUGFREIE
MONTAGE



ETHERNET
VERBINDUNG


Integrierbare Medikamentendatenbank Einen Schritt voraus

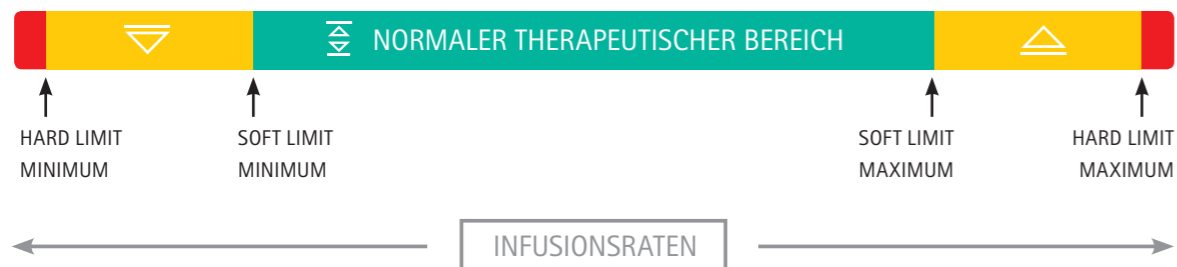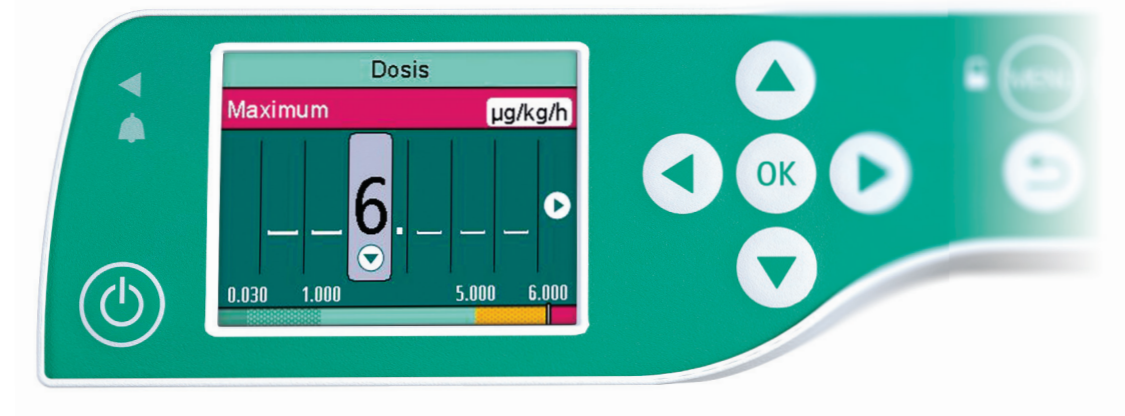


- B. Braun DoseGuard™ –**
- Mehr als 3.000 Medikamente
 - Stationspezifische Listen (Care Units)
 - Individuelle Medikamentenkonfigurationen




B. Braun OnlineSuite Innovative Lösungen

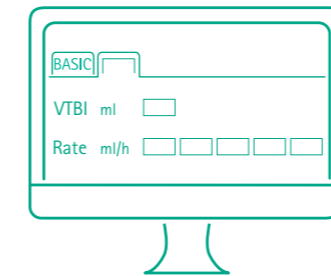

Drug Library Manager
Zentrale Verwaltung von Therapiedaten.

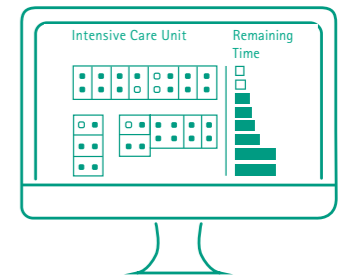


OneView
Höhere Effizienz durch zentrales Alarmmanagement für alle Bettenplätze einer Station.

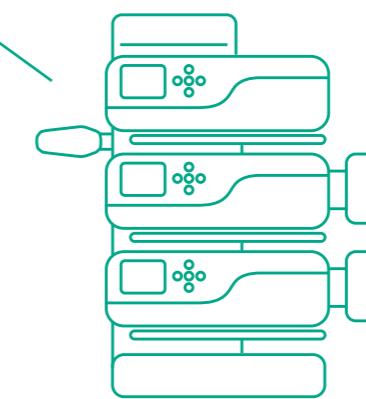


OnlineSuite – Infusionstherapie neu gedacht

- Eine Plattform für alle Applikationen
- Einfache Integration in das Krankenhausnetzwerk
- Stets aktuelle Medikamentendatenbanken:
 - Sekundenschnelle Aktualisierung via Netzwerk oder WiFi
 - Aktualisierung mit USB


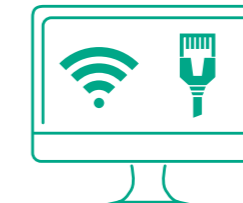


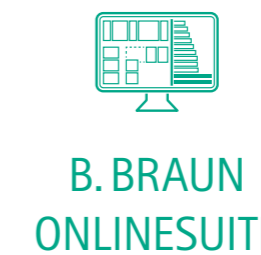

Upload Manager
Zentralisierter Upload über das Krankenhausnetzwerk ermöglicht stets aktuelle Medikamentendatenbanken und Gerätekonfigurationen.



Technische Daten

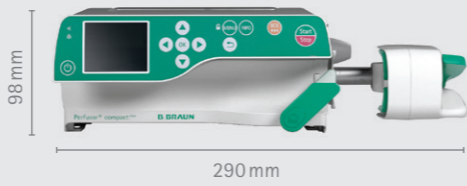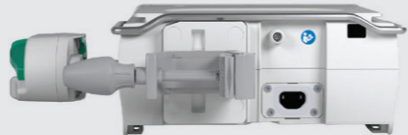ab April 2018

Perfusor® compact ^{plus}	Beschreibung	
Gerätetyp	Infusionsspritzenpumpe	 
Abmessungen	290 x 98 x 220 mm (B x H x T)	
Gewicht	2,3 kg	
Feuchtigkeitsschutz	IP34 (tropfwassergeschützt aus allen Richtungen)	
Display / Anzeige	2,4" TFT Farbdisplay, 240 x 320 Pixel, 262k Farben, Betrachtungswinkel: 80° rundum	
Stromversorgung	Wiederaufladbarer Lithiumionen-Akku Akkulaufzeit ca. 8 h bei 5 ml/h mit 50-ml-Spritze Ladezeit ca. 4 Stunden	
Förderratenbereiche	0,01-999,9 ml/h	
Förderratengenauigkeit	+/- 2% gemäß IEC/EB 60601-2-24	
Bolusgabe	Förderrate 1-1.800 ml/h	
Zugelassene Einmalartikel	B. Braun Original Perfusor Spritzen, B. Braun Omnifix, BD, Terumo, Monoject Spritzengrößen: 2/3, 5, 10, 20, 30, 50/60 ml	
Medikamentendatenbank	- bis zu 3.000 Medikamente - bis zu 15 Medikamentenkategorien	
Artikelnummer	8717030	


Infusomat® compact ^{plus}	Beschreibung	
Gerätetyp	Volumetrische Infusionspumpe	 
Abmessungen	229 x 98 x 220 mm (B x H x T)	
Gewicht	1,9 kg	
Feuchtigkeitsschutz	IP34 (tropfwassergeschützt aus allen Richtungen)	
Display / Anzeige	2,4" TFT Farbdisplay, 240 x 320 Pixel, 262k Farben, Betrachtungswinkel: 80° rundum	
Stromversorgung	Wiederaufladbarer Lithiumionen-Akku Akkulaufzeit von ca. 9 Stunden bei einer Förderrate von 100 ml/h Ladezeit ca. 4 Stunden	
Förderratenbereiche	0,1-1.200 ml/h	
Förderratengenauigkeit	+/- 5% über 96 Stunden	
Bolusgabe	Förderrate 1-1.200 ml/h	
Zugelassene Einmalartikel	Infusomat ^{plus} Leitungen	
Medikamentendatenbank	- bis zu 3.000 Medikamente - bis zu 15 Medikamentenkategorien	
Artikelnummer	8717050	


REINIGUNG UND DESINFEKTION


Gruppe	
Alkohole <ul style="list-style-type: none"> Meliseptol® New Formula Meliseptol® rapid Meliseptol® HBV Tissues Meliseptol® Foam pure Meliseptol® Wipes sensitive Softa® Cloth CHX 2% 	Quartäre Ammoniumverbindungen <ul style="list-style-type: none"> Hexaquart® forte Hexaquart® plus Hexaquart® plus lemon fresh Hexaquart® S
Aldehyde <ul style="list-style-type: none"> Melsept® SF Melsitt® 	Aktivchlor
Säuren	Phenole
	Peroxide
	Alkylamine

Substanzen der angeführten Gruppen von Desinfektionsmitteln sind zugelassen, unter Beachtung der normalen Reinigung gemäß den Anweisungen des Herstellers.

Technische Daten

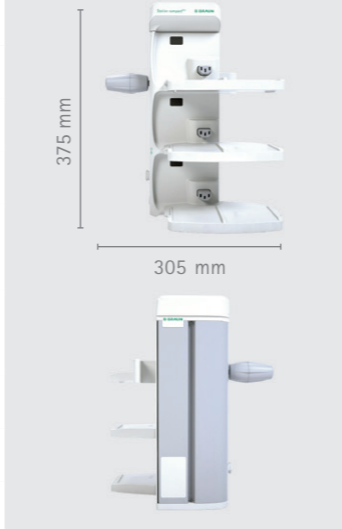Station compact ^{plus}	Beschreibung	
Gerätetyp	Ordnungssystem für bis zu 3 Infusionspumpen	
Abmessungen	305 x 375 x 202 mm (B x H x T)	
Gewicht	3,3 kg	
Feuchtigkeitsschutz	IP34 (tropfwassergeschützt aus allen Richtungen)	
Konfiguration	Werkzeugfreie Montage von bis zu 6 Stations compact ^{plus} (max. 18 Infusionspumpen) in 1 oder 2 Säulen	
Schnittstellen	- Infrarot - Personalruf	
Zubehör	Fixierung für Wandschienen- und Rohrsysteme	
Pole Clamp	Für vertikale Befestigung mit integriertem "Überdrehenschutz".	
Artikelnummer	8717141	

Cover compact ^{plus}	Beschreibung	
Gerätetyp	Abdeckung zum Aufsetzen auf eine bzw. die obere Station compact ^{plus}	
Abmessungen	128 x 44 x 124 mm (B x H x T)	
Gewicht	0,25 kg	
Feuchtigkeitsschutz	IP34 (tropfwassergeschützt aus allen Richtungen)	
Artikelnummer	8717145	

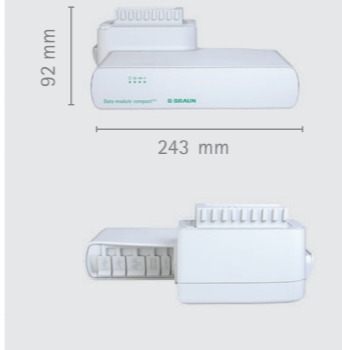Datenmodul compact ^{plus}	Beschreibung	
Gerätetyp	Datenmodul für Station compact ^{plus}	
Abmessungen	243 x 92 x 235 mm (B x H x T)	
Gewicht	1,1 kg	
Feuchtigkeitsschutz	IP34 (tropfwassergeschützt aus allen Richtungen)	
Schnittstellen	Datenkommunikation kann optional in eine Station compact ^{plus} integriert werden Datenaustausch für bis zu 18 Infusionspumpen möglich Schnittstellen: Ethernet, 2 x USB, WiFi, HDMI	
Artikelnummer	8717160	

Accessories

Produkt	Beschreibung	Artikelnummer
Verbindungskabel compact ^{plus} 60 cm	Kabel zur Verbindung von zwei Stations compact ^{plus}	8718060
Verbindungskabel compact ^{plus} 120 cm	Kabel zur Verbindung von zwei Stations compact ^{plus}	8718061
Verbindungskabel compact ^{plus} 1.000 cm	Kabel zur Verbindung von zwei Stations compact ^{plus}	8718062
Schnittstellenkabel compact ^{plus} 12 V	12 V Adapterkabel	8718020
Schnittstellenkabel compact ^{plus} Personalruf	Kabel zur Verbindung einer einzelnen Pumpe mit dem Personalruf	8718030
Schnittstellenkabel compact ^{plus} Personalruf Station	Kabel zur Verbindung einer Station mit dem Personalruf	8718031
Universalschienenklemme compact ^{plus}	Klemme zur Fixierung an Wandschienen und Rohrsystemen	8717142

B. Braun Austria GmbH | Otto Braun-Straße 3-5 | 2344 Maria Enzersdorf
Tel. 02236/46 541-0 | bbraun.austria@bbraun.com | www.bbraun.at